

LifeCall

Rufhilfe - Hausnotruf

A-8200 Lassnitzthal 214

Tel-Hotline: 0800 800 144

Telefon: +43 (0)3133 6111

www.lifecall.at

NEO

Installation für das NEO Hausnotruf Leihgerät

Allgemein:

Das Notrufgerät gibt Ihnen Sicherheit und ein Gefühl der Geborgenheit. NEO ist für den Gebrauch in der eigenen Wohnung, Haus oder Garten, oder auch für Wohnungen im Betreuten Wohnen angedacht.


NEO besteht aus vier Teilen:

1. Der Sender, ein Funkfinger samt Armband den man immer tragen sollte.
2. Der Hauptapparat der an das Telefonnetz angeschlossen wird. (sowie Telefonkabel und AC Netzgerät)

Wenn der Funkfinger durch ein Drücken auf das rote Feld aktiviert wird, so wählt das Hauptgerät eine vorprogrammierte Telefonnummer an die Notrufzentrale. Wenn der Anruf durch die Notrufzentrale beantwortet wird funktioniert das Gerät als Lautsprecher. Sie können dann, wo Sie sich auch in der Wohnung befinden, verständlich machen. Der gleiche Vorgang wird aktiviert wenn Sie auf den roten Knopf am Hauptapparat drücken.




Verpackungsinhalt

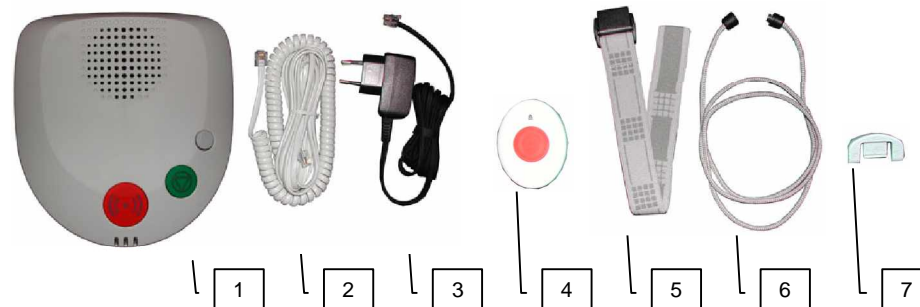

Installation


Der Funkfinger (4) wird am Arm mit dem Armband (5) angebracht oder kann auch als Halsband mit den Zubehörteilen (6) & (7) getragen werden.

Das beigegefügte Telefonanschlusskabel (2) soll mit dem Stecker **A** an der linken Öffnung mit dem **DREIECKS-SYMBOL**, an der an der Wand befindlichen Telefonsteckdose (8) verbunden werden. Das andere Ende **B** soll an der Unterseite des Notruftelefons (1) nur mit dem Anschluss "LINE" verbunden werden.

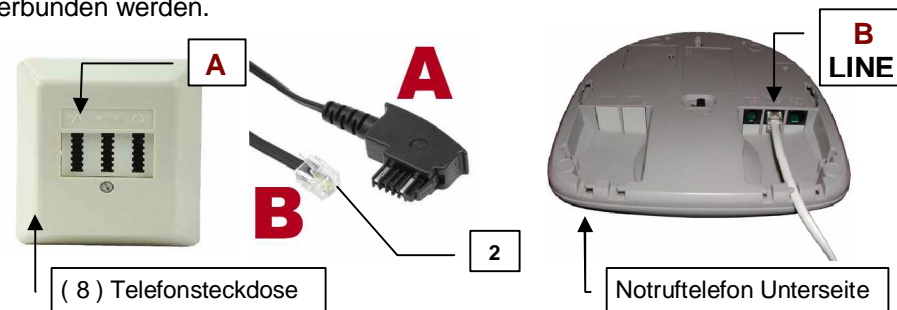

ACHTUNG! Kontrollieren Sie, dass das Notrufgerät immer als 1. Gerät links an der Telefonsteckdose (8) angeschlossen ist. ACHTUNG! Das Basisgerät eines Schnurlos Telefons soll nicht näher als 1 Meter vom Notrufgerät stehen.

Der Netzanschluss (3) darf nur auf der Unterseite des Notrufgerätes (AC) im Anschluss mit der Bezeichnung "AC" angeschlossen werden. Den Adapter (3) dann am normalen Netzanschluss (230 V) anschließen.

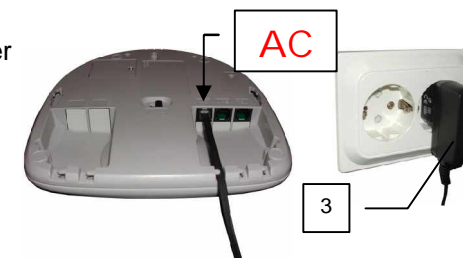

Das Notrufgerät kann auf einen kleinen Tisch gestellt oder an die Wand gehängt werden.

Das Notruftelefon wird dann eingeschaltet, indem Sie auf der Unterseite des Notruftelefons den vorhandenen Schiebeschalter in die Position " I " führen. (0 = ausgeschaltet / I = eingeschaltet).

Testanruf an die LifeCall Notrufzentrale:

Nun bitte einen Testanruf zur LifeCall Notrufzentrale auslösen. Auf die rote Fläche auf dem Funkfinger drücken und die Antwort der Notrufzentrale über die Freisprecheinrichtung abwarten. NEO ist nun Betriebsbereit.

Sollte jedoch Ihr Anruf nicht innerhalb von 3 Minuten ankommen, so drücken Sie die GRÜNE Taste am Gerät. Sie trennen damit die Telefonleitung. Bitte unverzüglich mit der LifeCall Notruf- und Servicezentrale telefonischen Kontakt aufnehmen.

Test des Empfangs des Funkfingers: (Funkfinger Reichweitentest)

Wenn Sie einen Reichweitentest durchführen wollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor: Der Schalter auf der Unterseite des Gerätes soll auf "O" (**ausgeschaltet**) stellen. Dann den grünen Knopf drücken und einhalten, sowie gleichzeitig den Kontaktschalter auf der Unterseite wieder auf "I" (**einschalten**) stellen.

Dann den grünen Knopf loslassen.

Sie werden drei Piepsignale hören.

Nun auf die rote Fläche auf dem Funkfinger drücken.

Wenn Sie ein kurzes Piepen hören und die Lampe blinkt **GRÜN** am Gerät und leuchtet auch gleichzeitig **GRÜN** auf dem Funkfinger auf, dann:

- besteht ein Funkkontakt zwischen Funkfinger und Hauptapparat.
- Ist der Funkfinger korrekt zum Hauptapparat programmiert.
- die Batterie im Funkfinger ist voll tauglich.

Sie können diesen Test auch gleichzeitig von allen Plätzen in der Wohnung, dem Haus oder vom Garten ausführen um zu kontrollieren ob der Funkfinger immer noch Kontakt zum Notruftelefon hat und Ihre Sicherheit gewährleistet ist. Leuchtet die Lampe am Funkfinger "**GRÜN**" auf, so besteht KONTAKT. Die Reichweite ist OK.

Leuchtet jedoch die Lampe am Funkfinger "**ROT**", dann besteht keine Reichweite zum Notruftelefon. Sie befinden sich ausserhalb der Reichweite.

Wenn Sie 4 Piepsignale hören ist die Batterie im Funkfinger schwach.

Um den Test zu beenden bitte den grauen Knopf drücken. Sie hören 3 Pieptöne und das Notrufgerät funktioniert normal.

ACHTUNG! Bitte die Armbanduhr (Funkfinger) immer in der Wohnung tragen. Der Funkfinger ist wasserdicht und kann beim Baden oder Duschen als auch beim Geschirrabwaschen getragen werden.

Indikationslampen

Auf der Vorderseite des Hauptapparates gibt es drei kleine Lampen. Diese leuchten mit:

- Grün - Wenn Ihr Telefonanschluss ausser Betrieb ist oder die Telefonverbindung unterbrochen ist,
- Rot - Wenn der Strom unterbrochen ist oder wenn der Akku nicht richtig in der Stromsteckdose (Kontakt) sitzt,
- Gelb - Wenn der im Hauptapparat eingebaute Akku geladen oder ausgetauscht werden muss.

Wenn eine dieser Lampen leuchtet bitte unbedingt direkt mit Ihrer LifeCall Notruf- und Servicezentrale Kontakt aufnehmen !

Austausch des Akkus

Der Austausch darf nur durch fachmännisch geschultes Personal durchgeführt werden. **ACHTUNG!** Bei Austausch muss die Telefonverbindung und die Stromverbindung unterbrochen werden. **ACHTUNG!** Nur Akkus der Firma NEAT dürfen verwendet werden. Produktnummer NE31 03001-31

Produkt nummer:	Notrufsystem	NE10 04002-03
	Hauptapparat	NE10 04003-01
	Funkfinger	NE10 03003-01

ACHTUNG! Nur mitgelieferten Adapter mit der Nummer PS49/1880 nutzen.

EU Declaration of conformity – Europäische Union

We, LifeCall Emergency Personal Response System, A-8200 Lassnitzthal 214, hereby declare under our sole responsibility, that this product, NEO, Home Care Phone, is in conformity with the EU Directives 1999/5/EC, 73/23/CE and 89/336/CEE and conforms to the following product specifications:

Safety: EN60950-1:2001; EMC: EN 301 489-3 v1.4.1 Class 1; Radio: EN 300 220-3 v1.1.1; Environmental: EN 50134-2:2000, EN50134-3:2002

D'Avia Wolfgang,

Date: 2005-09-14

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.

Doc.no. NE41 03001-06 Rev.A

